

ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04

AGITATORE PER SACCHE PIASTRINE

MOD. 723

COD. 29970018

CODICE CIVAB MSAASA73



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

DESCRIZIONE

L'agitatore per sacche piastrine mod. 723 è dotato di cestello a celle separate, atto a contenere n° 18 sacche piastrine da cc. 400.

La velocità costante (di 5 giri al minuto), consente di mantenere in continua sospensione il materiale cellulare prima della trasfusione.

Il cestello forato permette una circolazione d'aria, in modo da evitare variazioni di temperatura.

Il motore è disposto in posizione tale da garantire un lavoro continuo per molte ore senza rischi di surriscaldamenti.

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere, cestello in acciaio inox AISI 304 2B satinato.

Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano lavoro 9 scomparti LxPxA: 255 x 20 x 150 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 520 x 280 x 360 mm.
- ◆ Peso 10 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 45 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 x 0.5 A (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A


ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

ELENCO PARTI

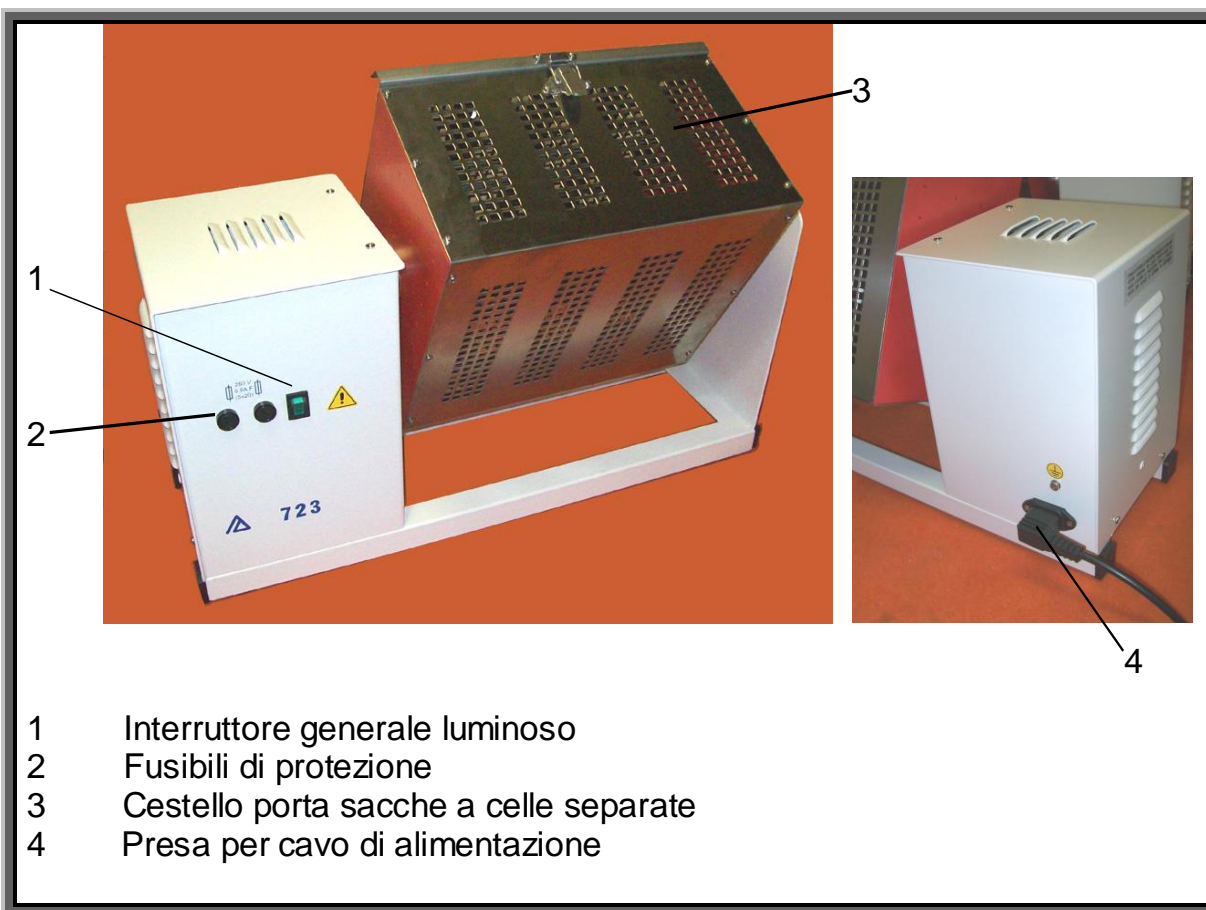

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY**



Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit

Denominazione apparecchio/Description:

**AGITATORE PER SACCHE PIASTRINE
PLATE BAGS STIRRER**

Modello / Model:

723

Numero di serie/Serial number:

Alimentazione/Power supply:

230V - 50 Hz

Fusibili di protezione/Overload fuses:

2 x 0,5 AF (5x20)

Grado di protezione/Protection grade:

I°

Assorbimento/Electrical input:

45 W

Anno di fabbricazione/Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / *in conformity with the following Directives:*
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

alla seguente Norma Europea/the following european standard:
CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051

alle seguenti Leggi Nazionali / *with the following National Laws:*
D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014, n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/UE)

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible:*
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info @asal.it**

Cernusco sul Naviglio,

ASAL s.r.l

Il Legale Rappresentante
The legal Representative
Elisa Tivelli

