


AGITATORE A RULLI PER EMATOLOGIA

MOD. 718

COD. 29970011

CODICE ALAASA78

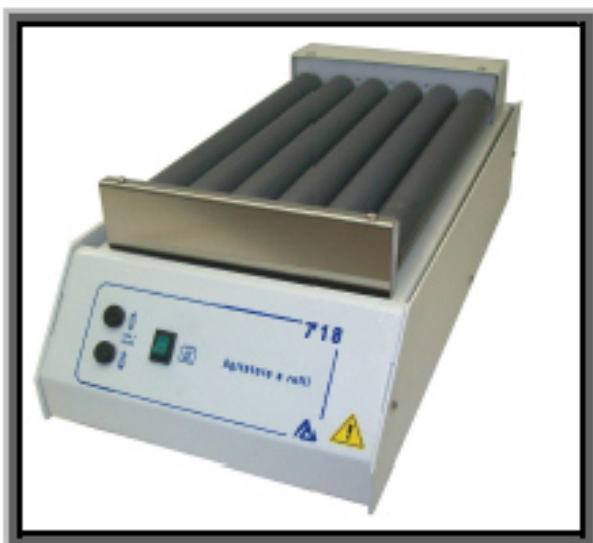

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore a rulli per ematologia mod. 718 è particolarmente indicato per mantenere in idonea agitazione provette con sangue intero per indagini ematologiche.

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere, 6 rulli antiscivolo in cloruro di polivinile Ø 30 mm, con movimento rotativo e oscillatorio.

Velocità di rotazione dei rulli 60 giri/minuto, 45 oscillazioni/minuto con ampiezza di mm. 28.

Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Dimensioni piano lavoro 5 piste lung. 330 mm.
- Dimensioni d'ingombro LxPxA: 245 x 545 x 190 mm.
- Portata max 2 Kg.
- Peso 12 Kg.

DATI ELETTRICI

- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- Assorbimento 80 W
- Fusibili di protezione 2 x 0.5 A (5 x 20) mm.
- Presa di collegamento rete 10 A

ELENCO PARTI



1. Fusibili di protezione
2. Interruttore generale luminoso

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY**



*Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit*

Denominazione apparecchio/Description:
**AGITATORE A RULLI PER EMATOLOGIA
ROLLER STIRRER FOR HAEMATOLOGY**
Modello / Model:

718

Numero di serie/Serial number:

Alimentazione/Power supply:

230V - 50 Hz

Fusibili di protezione/Overload fuses:

2 x 0,5 AF (5X20)

Grado di protezione/Protection grade:

IP

Assorbimento/Electrical input:

80 W

Anno di fabbricazione/Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / *in conformity with the following Directives:*
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2002/96/CE

alla seguente Norma Europea/the following european standard:
CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051

alle seguenti Leggi Nazionali / *with the following National Laws:*
D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible:*
sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info @asal.it

Cernusco sul Naviglio,

ASAL s.r.l
Il Legale Rappresentante
The legal Representative
Elsa Tivelli

