

ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04

AGITATORE PER 8 PIASTRE MICROTITER

CON CUPOLA TERMOSTATICA

MOD. 715 / CT +

COD. 29970025

CODICE ALAASA5C



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011.

ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

DESCRIZIONE

L'agitatore a vibrazione rotatoria (eccentricità 3.7 mm) per microtiter mod. 715/CT + è predisposto per contenere fino a 8 piastre microtiter fissate con molla in acciaio nichelato. Regolazione elettronica della velocità da 300 a 1500 giri/minuto. Funzionamento in continuo o prefissato, mediante timer, fino a 60 minuti.

Cupola termostatica in resina acrilica con elettroventola per circolazione aria. Temperatura massima di lavoro all'interno della cupola 50°C. Possibilità di variazione della temperatura di lavoro da ambiente a 50°C, tramite il termoregolatore/visualizzatore digitale, risoluzione $\pm 1^\circ\text{C}$, precisione 0.5 °C. Dispositivo di arresto agitatore all'apertura della cupola.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacida.
Cupola in resina acrilica.
Doppio piano di lavoro in alluminio ossidato.

Protettore termico in caso di eccessivo riscaldamento a riarmo manuale.
Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE


DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 300 x 480 x 240 mm.
- ◆ Doppio piano di lavoro in alluminio ossidato
- ◆ Dimensioni singolo piano di lavoro LxPxA: 270 x 195 mm.
- ◆ Peso massimo di carico sul piano di lavoro 0,5 kg.
- ◆ Peso 14 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 300 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 x 2 AF (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A

ELENCO PARTI

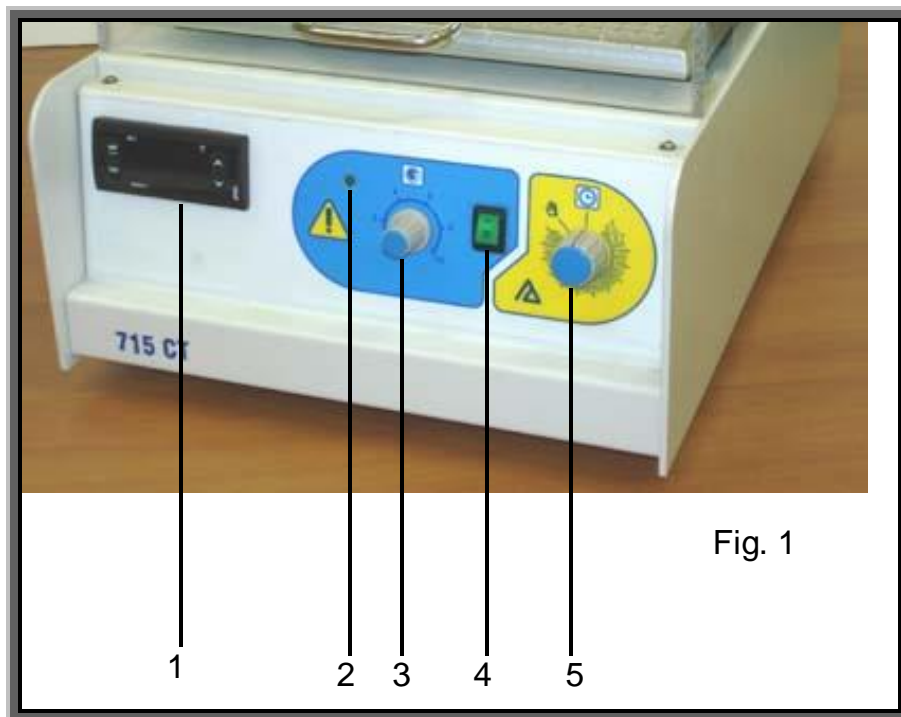

- 1 Indicatore-regolatore temperatura
- 2 Spia piano agitatore in funzione
- 3 Regolatore velocità agitatore
- 4 Interruttore generale luminoso
- 5 Temporizzatore

I fusibili di protezione (2x2 A F 5x20) sono situati sul retro dell'apparecchio.



Doppio piano di lavoro in alluminio

ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy
Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66
[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) - e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY**



Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit

Denominazione apparecchio/Description:
AGITATORE PER 8 PIASTRE MICROTITER CON CUPOLA TERMOSTATICA
8 PLATES MICROTITER STIRRER WITH THERMOSTATIC CUPOLA

Modello/Model:

715/CT +

Numero di serie/Serial number:

Alimentazione/Power supply:

220V - 50 Hz

Fusibili di protezione/Overload fuses:

2 x 2 AF (5X20) mm.

Grado di protezione/Protection grade:

I°

Assorbimento/Electrical input:

300 W

Anno di fabbricazione/Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive:

it is in conformity with the following Directives:

2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

alla seguente Norma Europea/the following european standard:

CEI EN 61010-1:2011

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:

D.lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/UE)

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible:*

**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info @asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

ASAL s.r.l

Il Legale Rappresentante

The legal Representative

Elisa Tivelli

