

ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI


Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04

AGITATORE A PIATTO ROTANTE CON VELOCITA' REGOLABILE

MOD. 712/R

COD. 29970002

CODICE CIVAB ALAASA72

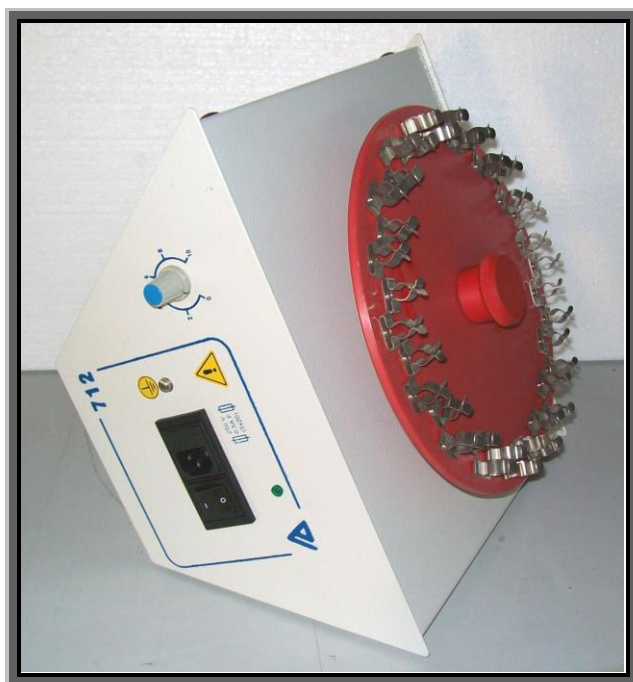

DESCRIZIONE

L'agitatore a piatto rotante mod. 712/R è particolarmente adatto per rendere e mantenere omogenei campioni di sangue e sospensioni cellulari.

Disco rotante munito di 36 clips con inclinazione a 57° o 63°. Il disco è munito di frizione che permette l'inserimento o l'espulsione di provette senza fermare l'apparecchio.

Disco con clips portaprovette di vari diametri: 9/13, 14/16, 22, 30, 50. Il disco può essere configurato con clips portaprovette differenti.

Regolazione della velocità di rotazione mediante regolatore a manopola da 20 a 65 giri al minuto.

Costruzione esterna in acciaio verniciato a polvere antiacida.

Interruttore generale e spia luminosa di accensione.


CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni disco Ø 240 mm. – 36 clips
- ◆ Dimensione d'ingombro LxPxA: 315 x 280 x 300 mm.
- ◆ Peso 6 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 40 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 x 0,5 AF (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A

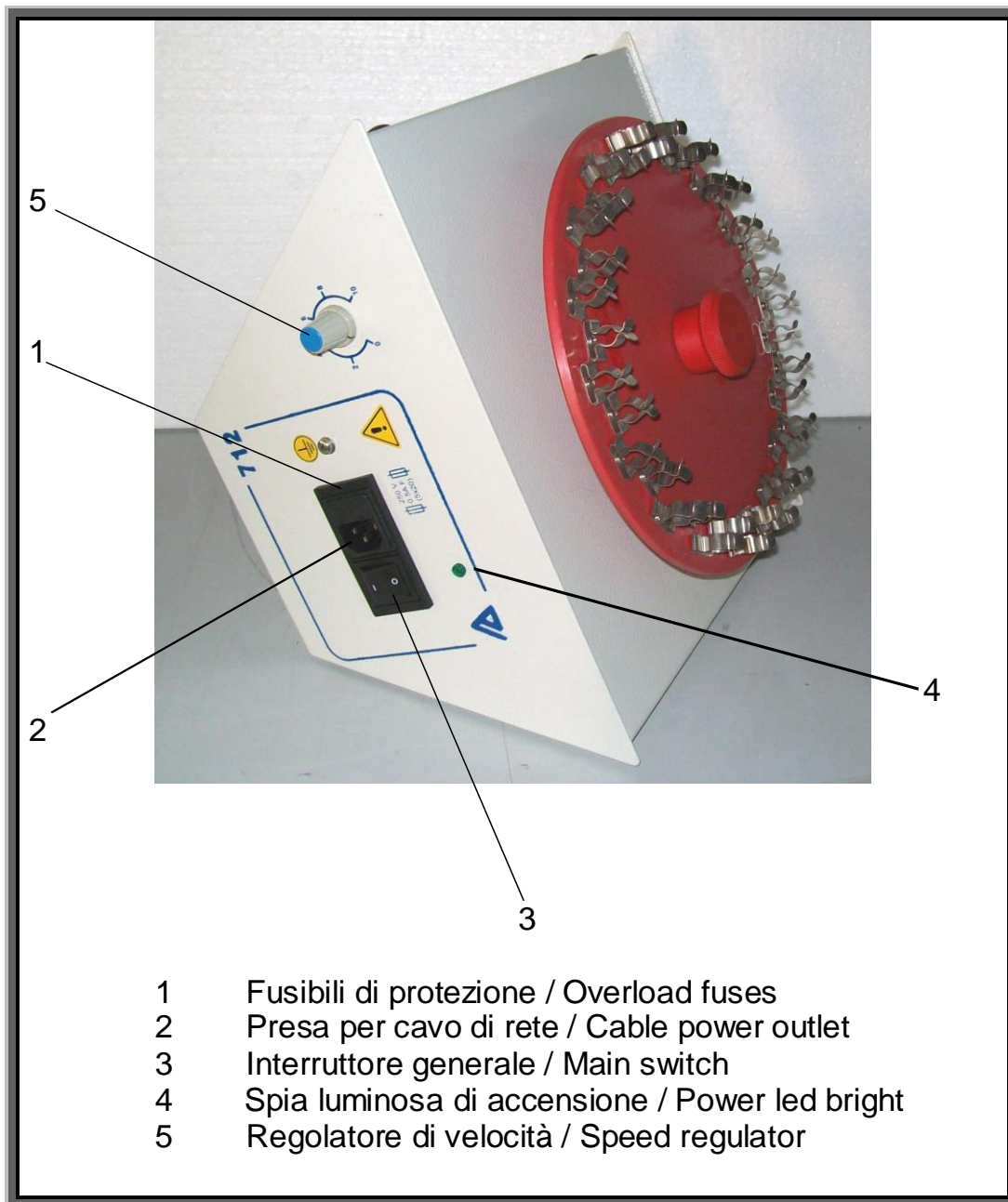

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY**



**Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit**

Denominazione apparecchio / Description:
**AGITATORE A PIATTO ROTANTE CON REGOLATORE DI VELOCITA' /
ROTATING PLATE STIRRER WITH SPEED REGULATOR**

Modello / Model:

712/R

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

230V - 50 Hz

Fusibili di protezione / Overload fuses:

2 x 0.5 AF (5x20) mm.

Grado di protezione / Protection grade:

IP

Assorbimento / Electrical input:

40 W

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / it is in conformity with the following Directives:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU

alla seguente Norma Europea / with the following european standard:
EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051, EN 61326-1:2013, EN ISO 12100:2010

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:
**D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014, n. 49 (attuazione della
direttiva 2012/19/UE)**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible*:
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

ASAL s.r.l
Il Legale Rappresentante
The legal Representative
Elisa Tivelli



CERTIFICATO

Nr 50 100 3290 - Rev. 04

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

ASAL S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA FIRENZE 37
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2008

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione, fabbricazione, assistenza di apparecchi scientifici ed attrezzature da laboratorio. Commercializzazione di attrezzature da laboratorio, materiale monouso, vetreria ed articoli tecnici medico scientifici (IAF 19, 29)

Design, manufacture and service of scientific appliance and laboratory equipment. Trade of laboratory equipment, disposable products, glassware and medical items for scientific and technical purposes (IAF 19, 29)



Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2015-07-26**

Ai / To: **2018-07-25**

REG. N° 0454 ISO N° 0092 EYD N° 0810
SQAN N° 0980 IIX N° 001L ISP N° 037E
SCR N° 006F FRS N° 071C LAB N° 007B

Membro degli Accordi di Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreement

Andrea Coscia
Direttore Divisione Management Service

Data emissione / Printing Date

2015-08-12

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-09-18

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SOVRIGILIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RISERVA COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE."

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

TÜV Italia S.r.l. • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20089 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it

TUV SUD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT